

Xpert® Préparation de la cartouche HIV-1 VL

- Xpert® HIV-1 Viral Load

Consulter la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la fiche technique santé/sécurité (SDS, Safety Data Sheet), consulter : www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Service d'assistance technique de Cepheid

Bureau aux États-Unis
(888) 838-3222, choix 2
techsupport@cepheid.com

Bureau en Europe
+33 563 825 319
support@cepheideurope.com

Avant de démarrer ce test :


1. Centrifuger l'échantillon afin de séparer le plasma et les globules rouges conformément aux instructions du fabricant.
2. Équilibrer l'échantillon à la température ambiante (20 °C – 35 °C).
3. Mélanger le plasma au vortex pendant 15 secondes ; si l'échantillon est trouble, clarifier en faisant tourner rapidement.




- 1** Prendre une cartouche Xpert pour chaque échantillon.



- 2** Ouvrir le couvercle de la cartouche.

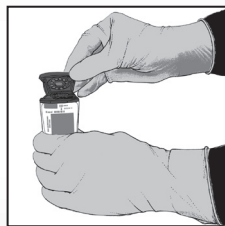


- 3** Aspirer le plasma jusqu'à un niveau juste au-dessus du repère de 1 ml sur la pipette.

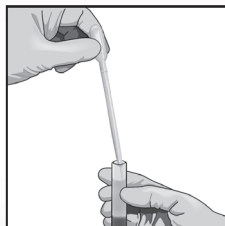

- 4** Vider le contenu dans la chambre d'échantillon.



- 5** Fermer le couvercle de la cartouche.

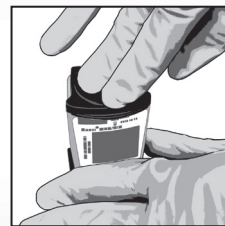

- 6** Démarrer le test dans le délai précisé dans la notice.